




VNOTES

Vaginal Natural Ori ce Transluminal Endoscopic Surgery VPORT Kapaklı Ekartör Sistemleri

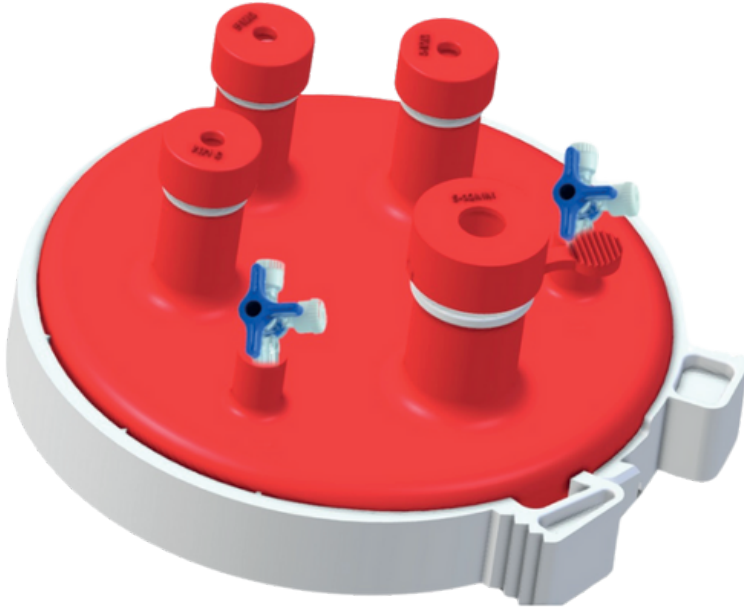

○ Poliüretan Ekartör SMALL

Small Ölçü ; Üst Halka 95 mm çapında
70 mm çapında alt halka.

○ Poliüretan Ekartör MEDIUM

Medium Ölçü ; Üst Halka 95 mm çapında
95 mm çapında alt halka.

○ Poliüretan Yapı

Alt halka vaginadan geçirilebilecek şekilde
katlanabilir esnek yapıdadır.

○ Ekartör Teknik Özellik

Ekartör PU lm kısmı en az 80 mikron kalınlığında
esneyebilen, yırtılmaya, delinmeye dayanıklı ve
görselleştirme sağlama için şeffaf yapıdadır.

Türkiye'nin ilk ve tek yerli VPortu



Laparoskopik Alet Geçiş Kapağı

Ekartör Kapağı ekartör üst halkası
üzerine ekstra alete gerek duymadan
rahatlıkla monte edilebilir ve gerektiğinde
sökülebilir yapıdadır.



Port Özellikleri

Kapak üzerinde 1 adet 10mm ve 3 adet 5mm
laparoskopik alet geçiş portu bulunmaktadır.
Bu portlar kapak üzerinde her yöne
esnetilebilir özelliktedir



Valf Sistemi

Valf sistemi ördek ve sliding valf bileşkesi
şeklinde 10mm port için 5-10 mm el
aletlerinin geçişine uygundur.
Sistem kullanım esnasında içeride bulunan
gazın dışarı kaçmasını etkin şekilde engelleyebilir
özelliktedir.



Port Teknik Özellik


Bu portlar kapak üzerinde her yöne esnetilebilir
özelliktedir. Port üzerinde insu asyon için luer
bağlantısı bulunmalıdır.



Vaka videosu izlemek için QR Kod

VPORT

Türkiye'nin ilk ve tek yerli VPortu

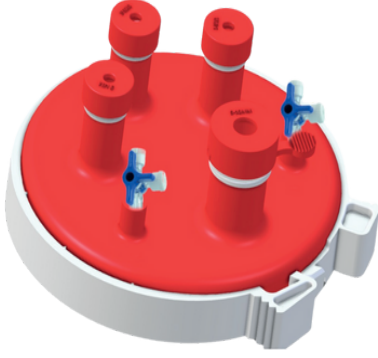

Maksimum **Koruma**



Minimum **Enfeksiyon Riski**

Maksimum **Görünürlük**



- ✓ Histerektomi
- ✓ Yüksek Uretosakral Süspansiyon
- ✓ Tüp Alma, Tüp Bağlama
- ✓ Ektopik Gebelik
- ✓ Yumurtalık Kisti (Over Kisti)
- ✓ Dermoid Kisti
- ✓ Tanısal (Diagnostik)
- ✓ Retroperitoneal Sentinel Lenf Nodu

